



La protesi scheletrata oggi:
il digitale incontra l'analogico.

Tre strade per il successo.

ANALOGICO - il metodo tradizionale

Come leader di mercato nelle leghe dentali e nei rivestimenti per protesi scheletrata, Dentaaurum ha sempre offerto solo la più alta qualità di materiali e accessori.

Sono stati sviluppati nuovi materiali da rivestimento e nuove leghe di migliorata qualità, come la remanium® GM 280 o il rema® blue.

- + Procedimento ben conosciuto
- + Provata tecnica di fusione
- + Preciso adattamento
- Tecnica di duplicazione che richiede tempo
- Costo dei materiali (silicone)




SEMI-DIGITALE - CAD/Vest con tecnica di fresaggio

I blanks in cera da fresatura, appositamente creati per la fusione di protesi scheletrata, offrono una buona opportunità per entrare nel mondo della produzione semi-digitale.

Presentano un elevato livello di elasticità, eccellenti proprietà di fresatura e bruciano senza lasciare residui. Parallelamente è stato sviluppato un nuovo rivestimento, particolarmente adatto per la fusione dei blanks in cera con le leghe remanium®.

- + Risparmio di tempo e denaro (nessuna duplicazione del modello)
- + Disegno al computer
- + Maggiore utilizzo di macchine fresatrici
- Costo del software di modellazione
- Flusso di lavoro non completamente digitale

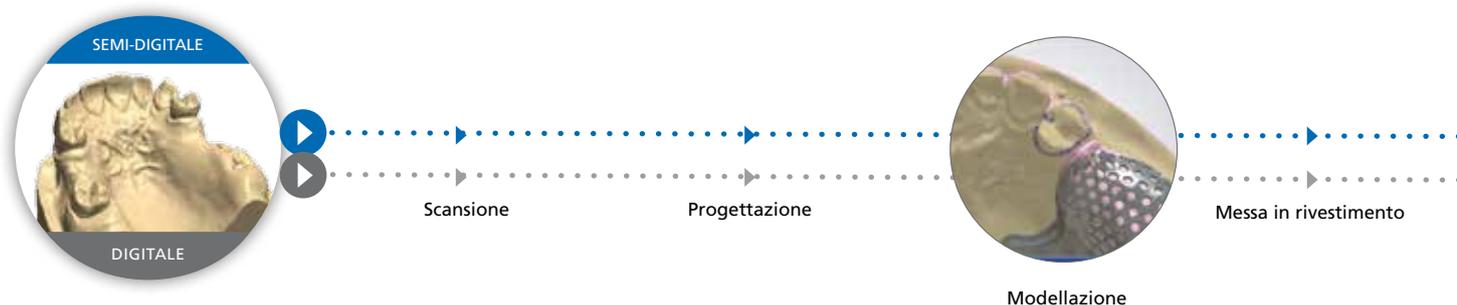

DIGITALE - laser melting selettivo

La Dentaaurum, azienda leader nello sviluppo di eccellenti leghe per la fusione di protesi scheletrata, ha sviluppato una polvere metallica per il moderno processo di laser melting selettivo. La remanium® star CL è stata progettata per essere impiegata con i macchinari della Concept Laser.

- + Risparmio di tempo e denaro (nessuna duplicazione del modello)
- + Disegno al computer
- + Produzione completamente digitale
- Costo dell'investimento elevato
- Costo dell'investimento elevato


La strada migliore per la protesi scheletrata.

Criteri decisionali utili per la vostra scelta

- ▶ È richiesta una produzione in loco?
- ▶ Quale tecnologia strumentale è disponibile?
- ▶ Si dispone di uno scanner e di un software di modellazione?
- ▶ Qual è la vostra esperienza nelle tecnologie digitali?
- ▶ Quanto alto è l'utilizzo dei macchinari?
- ▶ Si dispone di personale?
- ▶ Si è flessibili nella tempistica di consegna?
- ▶ Quanti scheletrati sono prodotti in un anno?



Rivestimento
rema® blue

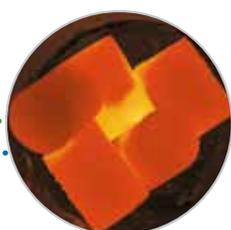


Fusione
remanium® GM 800+

Sabbiatura



Fresaggio
Blanks StarWax

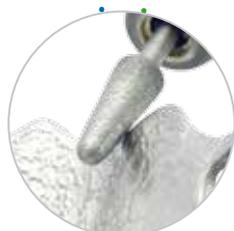


Rifinitura
Dischi separatori Supercut

Lucidatura
Pasta da lucidare Tiger



Metal printing
remanium® star CL

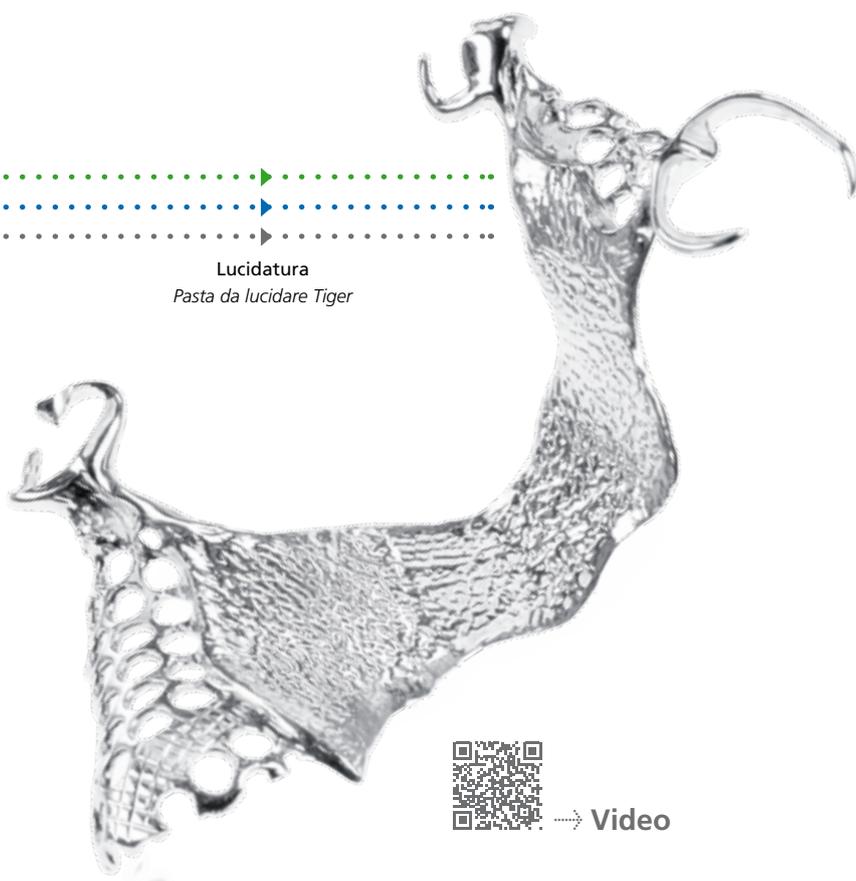

→ Video

Il Gruppo Dentaaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

➔ Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, visitare il sito www.dentaaurum.com

Data dell'informazione: 03/17

Soggetto a variazione



www.dentaaurum.com



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!



Dentaaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaaurum.it | info@dentaaurum.it