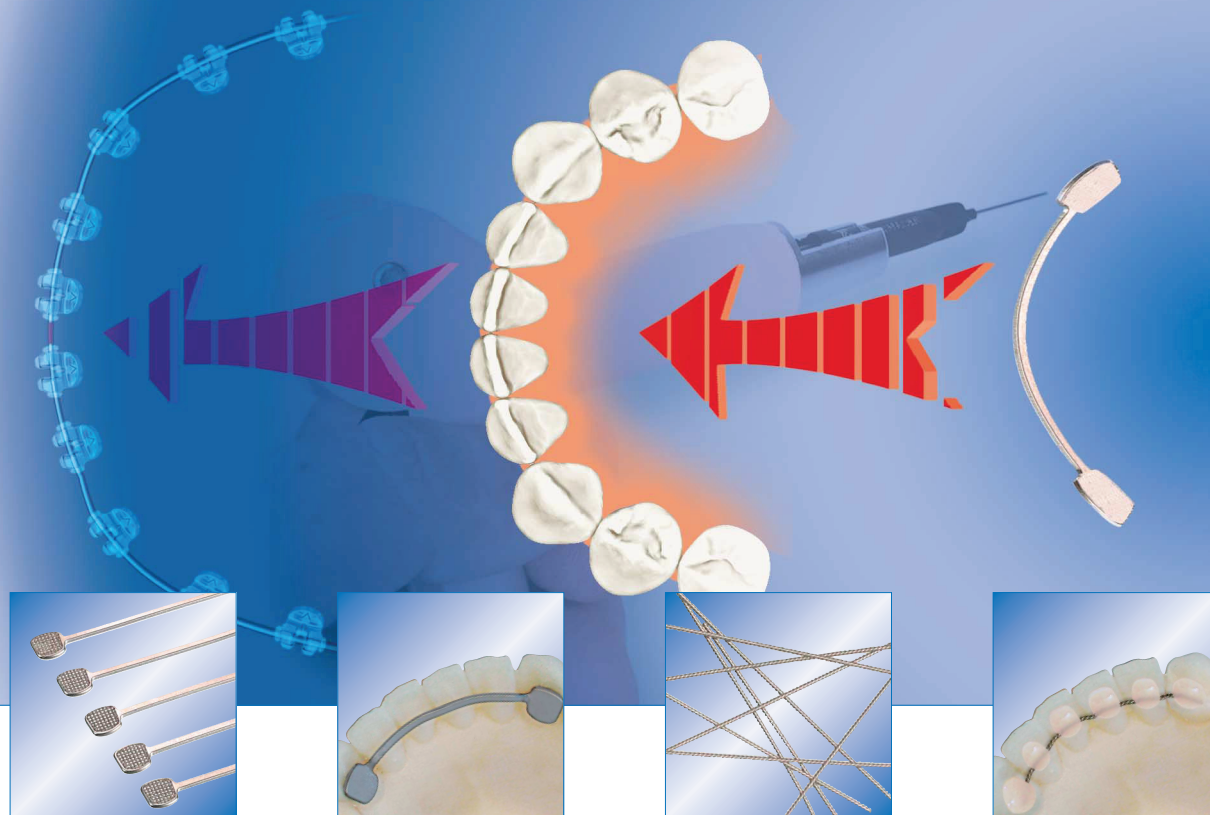




Retainer in titanio

La profilassi biotollerabile delle recidive

Al termine di ogni trattamento ortodontico attivo si dovrebbero adottare idonee misure di contenzione del risultato raggiunto. Per escludere la possibilità di recidiva, è spesso necessario un periodo di contenzione di anni. Tale contenzione può essere realizzata anche con retainers linguali preformati di varia lunghezza o con fili intrecciati da adattare individualmente al caso.

Titanio biocompatibile

Eccellente biotollerabilità

Dopo la formazione dello strato ossidante protettivo, il titanio diviene un materiale non reattivo. Spesso lo si definisce materiale „chimicamente inerte“. La passivazione è la chiave della sua capacità di inibire reazioni con saliva ed alimenti. Inoltre, a differenza di molte altre leghe, è assolutamente insapore.

Retainers linguali preformati

Costruiti in un unico pezzo

I retainers linguali preformati a due punti sono finiti in un unico pezzo. La struttura delle basi è stata creata con il laser per migliorare la ritenzione ai denti. Oltre a mostrare una bassissima propensione al distacco, presentano un’elevata resistenza alla corrosione ed un’ottima stabilità in quanto a sezione piatta.



Elementi in filo intrecciato

Straordinaria adattabilità

Gli elementi in filo intrecciato vengono fissati in sei punti (3-2-1-1-2-3) e presentano una buona stabilità in particolare a livello degli incisivi. Inoltre vengono ben accettati dai pazienti.



Confezioni

Descrizione	Lunghezza	ø	REF	Quantità
Retainer preformato in titanio	22 mm	0,7 mm / 28	728-506-00	1 pezzo
Retainer preformato in titanio	24 mm	0,7 mm / 28	728-507-00	1 pezzo
Retainer preformato in titanio	26 mm	0,7 mm / 28	728-508-01	1 pezzo
Retainer preformato in titanio	28 mm	0,7 mm / 28	728-509-01	1 pezzo
Retainer preformato in titanio	30 mm	0,7 mm / 28	728-510-01	1 pezzo
Filo in Ti 5 intrecciato 3x per retainer	50 mm	0,44 mm / 17	528-001-00	10 pezzi
Filo in Ti 1 intrecciato 3x per retainer	50 mm	0,44 mm / 17	528-001-01	10 pezzi
Filo in Ti 5 intrecciato 3x per retainer	50 mm	0,50 mm / 20	528-000-00	10 pezzi
Filo in Ti 1 intrecciato 3x per retainer	50 mm	0,50 mm / 20	528-000-01	10 pezzi
Matassa di filo in Ti intrecciato 3x	2 metri	0,50 mm / 20	528-000-02	1 pezzo

Data dell’informazione: 06/08