


tomas® PI
Palatal Implant



6 
motivi per scegliere
tomas® PI


experience & passion.

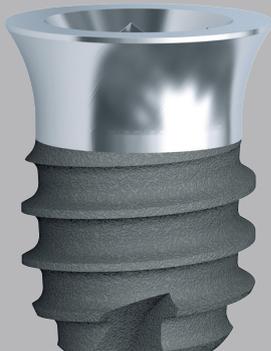

6 MOTIVI PER



Fornito in confezione blister sterile, comprensiva di cappetta di guarigione.

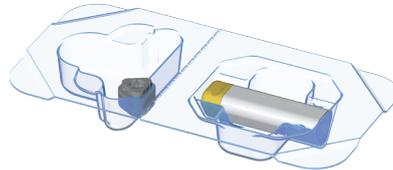


Risultati di successo in pochi passaggi.


- La sequenza di 2 frese e le spire autofresanti consentono una semplice inserzione della vite.
- Il collo a tulipano e la cappetta di guarigione convessa riducono l'eccessiva crescita gengivale.



Pulitura e disinfezione meccanica del tray strumenti per efficienti processi di lavoro.

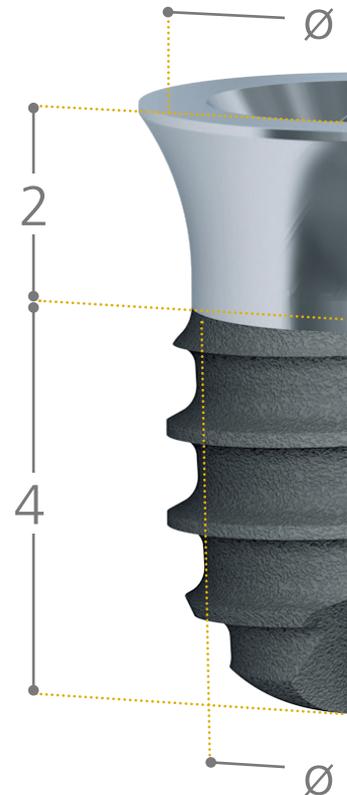

PER SCEGLIERE TOMAS[®] PI

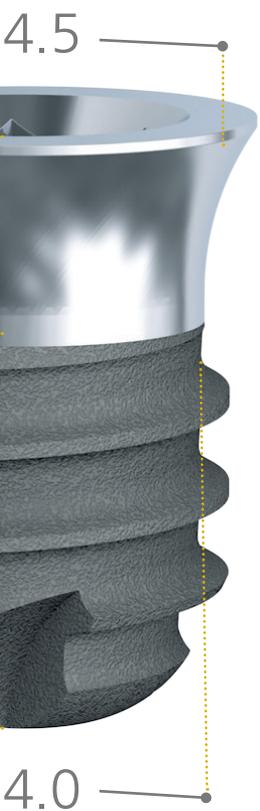


L'abutment universale funge da tappo di chiusura durante la guarigione e da ancoraggio dell'apparecchio durante il trattamento.

→ Sono disponibili abutment addizionali per l'accoppiamento diretto e indiretto.



Possibile workflow digitale e analogico.

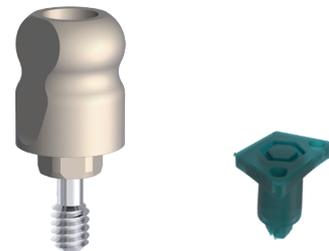

Semplice espanto della vite con gli strumenti presenti nel tomas[®] PI-tool.




1. tomas® PI 4.0

REF 303-100-40

Il tomas® PI (Palatal Implant) crea una possibilità di ancoraggio assoluto temporaneo per il trattamento ortodontico. Il tomas® PI presenta spire autofresanti con superfici sabbiate e mordenzate.

Il tomas® PI viene fornito sterile in una cannula di plastica a sua volta inserita in una confezione blister che contiene anche la vite di chiusura (tomas® PI-abutment multiple set REF 303-400-00) per la fase di guarigione.

Il tomas® PI viene fabbricato in lega di titanio TiAl6V4.

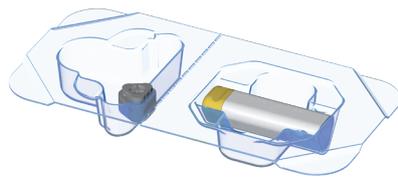


2. tomas® PI-impression post set

REF 303-400-30

Post per workflow digitale.

a. vite (303-400-20)

b. tomas® PI-impression post (303-400-31)

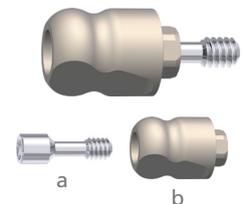

3. tomas® PI-transfer cap

REF 303-400-60

Cappetta di trasferimento per impronta analogica (solo con silicone o polieteri).



COMPONENTI DEL SISTEMA

4. tomas® PI-laboratory analog

REF 303-410-00

Analogo da laboratorio.



5. tomas® PI-abutment multiple 2.4 set

REF 303-400-00

Il tomas® PI-abutment multiple funge da tappo di chiusura dell'impianto nella fase di guarigione, ma anche per l'accoppiamento della vite tomas® PI con l'apparecchiatura ortodontica.

a. vite (303-400-20)

b. tomas® PI-abutment multiple 2.4 (303-400-10)




6. tomas® PI-abutment plain set

REF 303-400-40

Il tomas® PI-abutment plain è un altro elemento di accoppiamento della vite tomas® PI con l'apparecchiatura ortodontica.

a. vite (303-400-20)

b. tomas® PI-abutment plain (303-400-41)

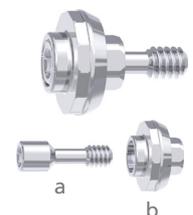


7. tomas® PI-abutment plain set con filo


REF 303-400-52

a. tomas® PI-abutment plain (303-400-41)

b. vite (303-400-20)

c. filo con tacca (303-700-00)

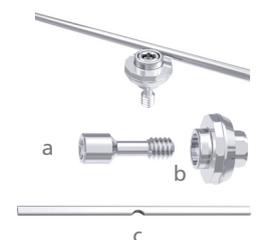

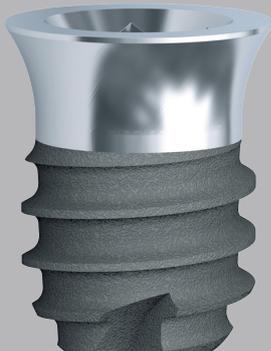


IL TRAY

8. tomas® PI-tool set

REF 303-010-00

Tray di sterilizzazione contenente tutti gli strumenti indispensabili per l'inserzione del tomas® PI.


Contenuto:

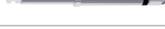1x	tomas® PI-reusable punch	303-210-10	
1x	tomas® PI-round drill	303-220-00	
1x	tomas® PI-lance drill	303-230-00	
1x	tomas® PI-pre-drill 2.0	303-240-20	
1x	tomas® PI-final drill 3.4	303-240-34	
1x	tomas® PI-depth gauge	303-240-54	
1x	tomas® PI-driver 2.5	303-310-00	
1x	tomas® PI-applicator	303-320-00	
1x	tomas® PI-torque ratchet	303-330-00	
1x	tomas® PI-wheel	303-340-00	
1x	tomas® PI-lock key	303-350-00	
1x	tomas® PI-driver 1.3	303-360-00	
1x	tomas® PI-guide sleeve	303-500-10	
1x	tomas® PI-trepan	303-500-20	
1x	tomas® PI-tool tray	303-010-10	



CHIRURGICO TOMAS® PI

Sequenza frese:

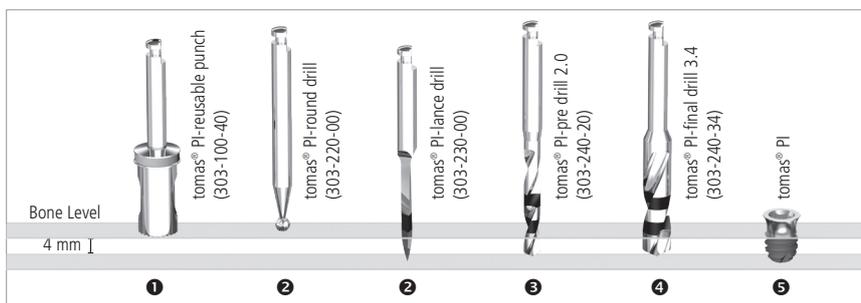

9. tomas® PI-explant set

REF 303-500-00

- a. tomas® PI-guide sleeve (303-500-10)
- b. tomas® PI-trepan (303-500-20)



Il Gruppo Dentaaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Per informazioni sui nostri prodotti e servizi, visitare il sito www.dentaaurum.com
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051/86.19.35

Assistenza tecnica: 051 862580 | E-Mail: ortodonzia@dentaaurum.it
Assistenza commerciale: 051 862580 | E-Mail: ordini@dentaaurum.it

Data dell'informazione: 12/21

Soggetto a variazioni



shop.dentaaurum.it



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!

D
DENTAURUM
ITALIA